

800 mg

800 מ"ג

800 מ"ג

When to use Nasaleze

Take **Nasaleze** before symptoms start.

Nasaleze is a preventative treatment in the fight against cold viruses.

Nasaleze has been clinically proven to help stop the onset of a cold or shorten its duration.

Nasaleze is clinically proven to work effectively in adults and children from 3 years.

If symptoms of cold have already started before taking **Nasaleze**, you can still apply **Nasaleze** to shorten its duration.

If concurrent use of another nasal spray is required, **Nasaleze** should be re-applied afterwards so that the barrier created is not disturbed.

Nasaleze can be used in addition to medicines, as part of a combination therapy strategy in the fight against cold.

How does Nasalezework?

The most common route of infection for colds is through the nose. Cold viruses enter the nose and attach to the nasal lining, where they multiply and spread. This then leads to symptoms, such as a blocked or runny nose, sore throat, headache and coughing. In the initial stages of a disease you often cannot distinguish between the common cold. Influenza is a potentially serious disease; the definitive diagnosis requires a physician.

Nasaleze is a powder nasal spray. The powder turns to a gel in the nose which creates a barrier to shield, protect and deactivate airborne germs and viruses.

Nasaleze can shorten the duration and severity of cold like symptoms.

Nasaleze can help stop the reappearance of virus-related cold like symptoms.

The **Nasaleze** treatment action has been proven in 4 clinical studies.



SPRAY → TRAP & DEACTIVATE → HELPS DEFEND AGAINST COLD

Who can use Nasaleze?

Nasaleze is suitable for adults, athletes, pregnant and breast-feeding women and children from 3 years.

Keep out of reach of young children.

Nasaleze does not contain any drugs or medicines.

Nasaleze has a good safety profile.

Nasaleze is non-drowsy.

وقت استخدام Nasaleze

استخدم **Nasaleze** قبل بدء الأعراض.

Nasaleze عبارة عن علاج وقائي لمحاربة فيروسات البرد والإنفلونزا.

Nasaleze أثبتت نجاحه سريريًا في المساعدة على إيقاق ظهور البرد أو الإنفلونزا أو تقصير مدتهما.

Nasaleze أثبتت نجاحه سريريًا في العمل بفعالية في البالغين والأطفال من سن 3 سنوات.

إذا بدأت أعراض البرد أو الإنفلونزا بالفعل قبل تعاطي **Nasaleze**، سيظل بإمكانك استخدام **Nasaleze** لتقصير مدة الإصابة.

إذا لزم استخدام بخاخ آخر في نفس الوقت، فينبغي إعادة وضع **Nasaleze** بعده بحيث لا يتأثر الحاجز المكون.

Nasaleze يمكن استخدامه كعلاج مدمج ضد البرد والإنفلونزا.

من يمكنه استخدام Nasaleze?

Nasaleze ملائم للبالغين والرياضيين والسيدات الحوامل والمرصعات والأطفال من بدءًا من سن 3 سنوات.

احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

Nasaleze لا يحتوي على أية عقاقير أو أدوية.

Nasaleze يتمتع بمعدل سلامة جيد.

Nasaleze لا يسبب الدعاس.

كيف يعمل Nasaleze

الأكثر شيوعًا لدخول البرد هو من خلال الأنف. تدخل فيروسات البرد الأنف وتربط ببطانة الأنف حيث تتضاعف وتنتشر. يؤدي هذا بعد ذلك إلى أعراض مثل انسداد الأنف أو سيلان، ألم الحلق، الصداع والسعال. في المراحل الأولى من المرض، لا يمكنك غالبًا التمييز بين البرد والسعال والإنفلونزا. يمكن للإنفلونزا أن تكون مرضًا خطيرًا، ويحتاج التشخيص القاطع إلى طبيب.

Nasaleze عبارة عن مسحوق بخاخ أنفي. يتحول المسحوق إلى هلام (جل) في الأنف مما يمنع حاجزًا يعمل على

لحماية والوقاية من الجراثيم والفيروسات المنقولة بالهواء وتثبيتها.

Nasaleze يمكنه أن يقصر من مدة وحدة أعراض البرد والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا.

Nasaleze يمكنه المساعدة على إيقاق معاودة ظهور أعراض البرد والنتيجة عن الفيروسات.

أثبتت نجاعة علاج **Nasaleze** نجاح في 4 دراسات سريرية.



رش ← احجب ← يساعد على الحماية والوقاية

כיצד פועל Nasaleze?

האיבר השכיח ביותר להידבקות בצינון הוא האף. נגיפי הצינון נכנסים לאף ונצמדים לרירית האף, שם הם מתרבים ומתפשטים. התפתחות זו מובילה להופעת תסמינים כגון אף סתום או נוזל, כאב גרון, כאב ראש ושיעול. בשלביה הראשונים של המחלה לעתים קרובות לא ניתן להבחין בין הצטננות ומחלה שעלולה להיות תמורה; אבחון מוחלט נעשה על ידי רופא.

Nasaleze הוא תרסיס אבקתי לאף. האבקה הופכת באף לנ"ל ויוצרת שכבת חוץ המגנה מפני חיידקים ונגיפים הנישאים באוויר ומנסרות אותם.

שימוש ב-**Nasaleze** יכול לקצר את משך התסמינים של הצינון ולהפחית מחומרתם.

שימוש ב-**Nasaleze** יכול לסייע בעצירת חוררתם של תסמינים כנגיפים של צינון.

יעילותו של הטיפול ב-**Nasaleze** הוכחה באמצעות 4 מחקרים קליניים.



התנה ← לידה והגנה ← סיוע במניעת צינון

חתי יש להשתמש ב- Nasaleze

יש להשתמש ב-**Nasaleze** למניעת צינון טרם הופעת התסמינים.

Nasaleze הוא טיפול מונע המסייע למחלה בנגיפי הצינון.

Nasaleze הוכח קלינית כמסייע בעצירת תחילת הצטננות או בקיצור משך המחלה.

Nasaleze הוכח קלינית כיעיל במבוגרים ובילדים מגיל 3 ומעלה.

במקרה שתסמיני הצינון הופיעו עוד טרם לקחת **Nasaleze**, ניתן להשתמש ב-**Nasaleze** לקיצור משך המחלה.

אם דרוש שימוש בו-זמני בתרסיס אף נוסף, יש לשוּב ולהחזיר **Nasaleze** לאחר השימוש בתרסיס האחר, על מנת למנוע פגיעה בשכבת החוץ שנוצרה.

Nasaleze ניתן לשימוש יחד עם תרופות אחרות, כטיפול משולב נגד צינון.

מי יכול להשתמש ב- Nasaleze?

Nasaleze מתאים לשימוש במבוגרים, ספורטאים, נשים הרות ומניקות וילדים מגיל 3 שנים ואילך.

יש להרחיק מרחשן ידם של ילדים צעירים.

Nasaleze אינו מכיל סמים או תרופות כלשהם.

Nasaleze הגו בעל פרופיל בטיחות טוב.

Nasaleze אינו גורם נמנום.

If Nasaleze is not adequately relieving your symptoms...

Consult your physician about what medication you could take to supplement your **Nasaleze** in the fight against cold.

Read the above guidance carefully and try **Nasaleze** using the 5 steps.

How to store Nasaleze

Do not rinse the bottle with water or other liquid as this may block the bottle.

Do not use if tamper evident seal is broken.

Always replace the cap.

Store at room temperature, or between 5°C and 30°C

Once opened use within 6 months.

Do not refrigerate or freeze.

Contraindications

Not suitable for children under 3 years.

Do not use this product if you are sensitive to cellulose, mint or garlic.

Avoid contact with eyes.

Avoid contact with open wounds.


If powder gets into your eye, rinse with water.

To avoid contamination do not use this product for more than one person.

Very few cases of allergic reactions to this product have been reported. Minor reports received have been blocked nose, runny nose, sneezing, sore throat. If you experience reactions more severe than this then use of the product should be discontinued immediately and if symptoms persist, consult your physician.

How to use Nasaleze

To defend against cold, **Nasaleze** needs to be applied 2 to 3 times per day to maintain an effective barrier. Or if symptoms have already started take **Nasaleze** 3 times per day until symptoms disappear.

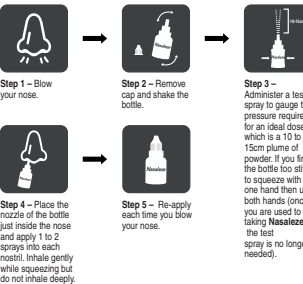

During first use, you may experience a tingling or burning sensation in the nose or light sneezing. This is a transient sensation that will go away as you become used to taking **Nasaleze**.

You may also feel some form of irritation, especially if your nasal membranes are already inflamed or irritated. This will subside quickly.

Some individuals can feel a slight sensation of a blocked nose, this is normal and is the feel of the barrier created by **Nasaleze**.

If you experience serious discomfort after application of **Nasaleze** consult your physician.

If concurrent use of another nasal spray is required, **Nasaleze** should be re-applied afterwards so that the barrier created is not disturbed.

דא למ יעמל Nasaleze על איראח אעראכ בשכל כאף...

אסנפער טרייבט בשאף מאהיב הוואו וואס יעמאכט טעאפער מעמאל מע **Nasaleze Cold & Flu Blocker** אין מאקווע אלדער וואלפאנא.

אפרא דאלייל אגלע יכרש ואסנעד **Nasaleze** מן חלל חסס חטוא.

طريقة حفظ Nasaleze

لا تشطف الفلاורה بالماء أو سائل آخر حيث يمكن لهذا أن يسد الفلورة.

لا تستخدمه إذا كان ختم الدليل على العبث مكسوراً.

أعد وضع الغطاء دائماً.

احفظه في درجة حرارة الغرفة، أو بين 5 و30 درجة مئوية ما أن تفتح الفلورة استخدمها خلال 6 أشهر.

لا تبرد المنتج أو تجمده.

موانع الاستخدام

غير ملائم للأطفال دون سن 3 سنوات.

لا تستخدم هذا المنتج إذا كانت لديك حساسية من الساليبارون، البنغاد أو اللؤلؤ.

تقاد ملامسة العينين.

حي ملامسة الجروح المكشوفة.

إذا دخل المسحوق إلى عينيك، بالماء.

لتفادي التلوث، لا تستخدم هذا المنتج لأكثر من شخص واحد.

تم الإبلاغ عن حالات قليلة جداً من ردود فعل الحساسية على هذا المنتج شملت تقارير تالانوية مقدمة أسداد الأنف، سيلان الأنف، العطس، ألم الحلق. إذا اختبر ردود فعل أكثر حدة من هذه، فبديهي التوقف عن استخدام المنتج فوراً، وإذا استمرت الأعراض، فاستشر طبيبك.

طريقة استخدام Nasaleze

لمعالجة البرد والإنفلونزا، بخاخ **Nasaleze** إلى استخدامه مرتين إلى 3 مرات يومياً بخاخاً على خاخر فعال. أو في حال أن الأعراض قويت بالغل، فاستخدم **Nasaleze Blocker** مرات يومياً حتى يوال الأعراض.



أثناء الاستخدام الأول، قد تحسّر شعوراً بالوخز أو الحرقه في الأنف أو قد تفسس بشكل خفيف. هذا شعور مؤقت سيبرول مع اعتيادك على الاستخدام.

د تشعر أيضاً بنوع من التقيح، وخصوصاً في مخاطية الأنف الملتصبة أو المتهيبة بالغل. سيبرول هذا سريعاً.

يمكن لبعض الأفراد أن يشعروا بانسداد خفيف في الأنف، وهذا طبيعي وينتج عن الجاخر الذي يصمعه **Nasaleze**.

إذا اختبرت أعراضاً خطيراً بعد وضع


Nasaleze، فاستشر طبيبك.

إذا لزم استخدام بخاخ أنف آخر في نفس الوقت، فبديهي إعادة وضع **Nasaleze** بعده بحيث لا تتأثر رافة الحماية الممكنة.

رقم تسجيل أجهره طيبة 31610001

אופן השימוש - ב-Nasaleze

להגנה מפני צינון, יש להשתמש ב- **Nasaleze** פעמיים עד 3 ימים 3-4 מראות יומית בנאח על האחר فعال. או בפי אל אל הארצות פוריות באלפל, פאסנעד **Nasaleze Blocker** מראות יומית עד יואל הארצות.

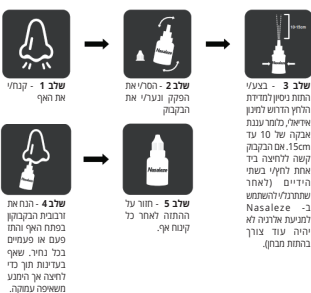

במהלך השימוש הראשון, ייתכן תחושה עקצוץ או צריבה באף ואף התעטשות קלה. זוהי תחושה זמנית העתידה להחלוף ככל שהשימוש ב- **Nasaleze** ייפחך רגיל יותר.

ייתכן גם תחושה גירוי מסוימת, בייחוד אם רירית האף כבר מודלקת או מנוהה. תחושה זו תחלוף עם הזרה.

חלק מהמסופלים עשויים להרגיש תחושה קלה של אף סתום, זוהי תופעה נורמלית הנובעת משכבת המן ההולכת ובנבית על ידי **Nasaleze**.

במקרה שישנה תחושה א-נחות חמורה לאחר השימוש ב- **Nasaleze** יש להפסיק ברופא.

אם יש צורך בשימוש בו-זמני בתרסיס אף, יש להתיי **Nasaleze** מחדש לאחר השימוש בתרסיס האחר, על מנת ששכבת המן שנוצרה לא תפוע.

מס' רישום א"ר: 31610001

במקרה ש-**Nasaleze** לא חקל על התסמינים במידה מספקת...

יש להיוועץ ברופא לגבי לקיחת תרופה משלימה שתסייע ל- **Nasaleze**.

יש לעיין בשתומת לב בהנחיות לעיל ולהשתמש ב **Nasaleze** תוך מליו 5 השלבים.

אופן אחסון Nasaleze

אין לשטוף את הבקבוק במים או בנוזל אחר, כיון שהדבר עלול לגרום לסתירת הבקבוק.

אין להשתמש אם אסם המן שבור.

תמיד יש לסגור את הפקוק.

יש לאחסן בטמפרטורות חדר, או בין 5°C ל- 30°C

מרגע הפתיחה יש להשתמש תוך 6 חודשים.

אין לאחסן במקרר או במקפיא.

התוויות נגד

אסור לשימוש בילדים בני פחות מ-3 שנים.

אין להשתמש במוצר אם ידועה גישות לאלרול, מנסה או שום.

יש להימנע ממגע עם העיניים.

יש להימנע ממגע עם פצעים פתוחים.

במקרה של נכיסת אבקת לעינים, יש לשטוף במים.

למניעת זיהום, השימוש במוצר זה מוגבל לאדם אחד בלבד.

קיימים מעט מאוד מקרים שבהם דווח על תגובה אלרגית למוצר זה. מעט ידיוחיים מעידים על אף סתום, אף נוזל, עישוש, כאב גרון. במקרה של תגובות חמורות יותר מחלו המתוארות לעיל יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ואם התסמינים ממשיכים, להיוועץ ברופא.


Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House,
Balfalshet Business Park, Douglas,
Isle of Man, IM4 4QE, UK

מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו

מכיון עד יד:
מס' רישום א"ר: 31610001
טלפון: 50 עד יד
1-700-510228


מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו


Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House,
Balfalshet Business Park, Douglas,
Isle of Man, IM4 4QE, UK

מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו

יבוע بواسطة شركة
1700501028
طرق هاتفي: 50 עד יד


מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו

NASA-COLD-ISR 02/20


Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House,
Balfalshet Business Park, Douglas,
Isle of Man, IM4 4QE, UK

מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו

Imported by: TRUSTPHARM Ltd,
50 Haskins St., Tel-Aviv, 1700-501-028


מספר ח'נים: 1800-282-444
החיות שטבעו

NASA-COLD-ISR 02/20